


LE MATERIEL MIS A VOTRE DISPOSITION

Pour les prélèvements sanguins



Pour les urines

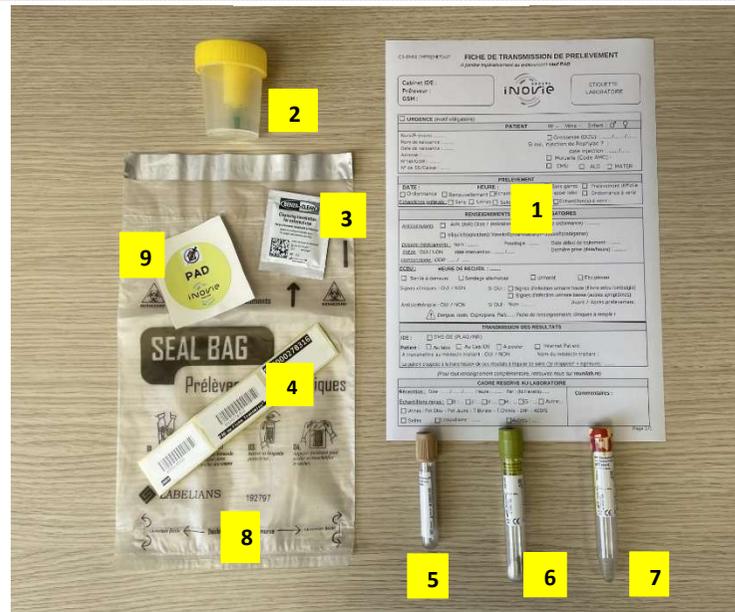

Pour les autres prélèvements



Selles :

- ① Boîte triple emballage
- ② Pansement
- ③ Série d'étiquettes avec code-barres
- ④ Lingette désinfectante
- ⑤ Corps de pompe (à la demande)
- ⑥ Tubes
- ⑦ Aiguilles
- ⑧ Fiche de transmission de prélèvement
- ⑨ Aiguilles à ailettes (à la demande)
- ⑩ Etiquettes « URGENT » et/ou « PAD » à coller sur la boîte si besoin

- ① Fiche de transmission de prélèvement
- ② Pot stérile pour recueillir les urines (ECBU / IST)
- ③ Lingette désinfectante
- ④ Série d'étiquettes avec code-barres
- ⑤ Tube pour chimie urinaire
- ⑥ Tube borate pour les ECBU : attention au remplissage !!
- ⑦ Tube UAP pour pH urinaire, recherche de sang, acétonurie (à la demande)
- ⑧ Sachet transparent double poche
- ⑨ Etiquette « PAD » à coller sur la boîte si besoin

Ecouvillonnages divers :



Le manuel de prélèvement est à votre disposition en ligne sur **reunilab.re** *

Une fois les tubes percutés, vous pouvez éliminer le pot

Ne prélevez que les tubes nécessaires !!

Les renseignements cliniques sont obligatoires

REEMPLIR LA FICHE DE TRANSMISSION / UTILISER LES ETIQUETTES

Une fois l'identité correctement renseignée sur la fiche de transmission, la série d'étiquettes fait le lien entre la fiche, l'ordo et les tubes transmis...

Identifier à la main pour l'immuno-hématologie (groupe sanguin, RAI...)

C3-EN01 [IMPR][NET]v18 **FICHE DE TRANSMISSION DE PRELEVEMENT**
A joindre impérativement au prélèvement sauf PAD

Un renseignement manquant, une précision...merci de mettre votre nom et un numéro où nous pouvons vous joindre.

Cabinet IDE :
Préleveur :
GSM :



ETIQUETTE
LABORATOIRE



930000278316



BILAN URGENT ?
Précisez les signes cliniques qui motivent l'urgence de la demande.

URGENCE (motif obligatoire)

PATIENT Mr - Mme - Enfant : ♂ ♀
Nom/Prénoms :
Nom de naissance :
Date de naissance :
Adresse :
N°Tél/GSM :
N° de SS/Caisse :

Grossesse (DDG) :/...../.....
Si oui, injection de Rhophylac ? :
date injection :/...../.....
 Mutuelle (Code AMC) :
 CMU ALD MATER

PRELEVEMENT

DATE : **HEURE :**
 Sans garrot Prélèvement difficile

Ordonnance Renouvellement Echantillon manquant sur appel labo Ordonnance à venir
Echantillons prélevés : Sang Urines Selles Ecouvillons Echantillon(s) à venir :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES OBLIGATOIRES

Anticoagulants AVK (INR) Cible :
 Eliquis®(apixaban)/ Xarelto®(rivaroxaban)/Pradaxa®(dabigatran)

Dosage médicaments : Nom : Posologie : Date début de traitement :
Préop : OUI / NON date intervention :/...../..... Dernière prise (date/heure) :

Hormonologie : DDR :/.....

ECBU : **HEURE DE RECUEIL :**
 Sonde à demeure Sondage aller/retour Urinocol Etui pénien

Signes cliniques : OUI / NON SI OUI : Signes d'infection urinaire haute (fièvre et/ou lombalgie)
 Signes d'infection urinaire basse (autres symptômes)

Antibiothérapie : OUI / NON SI OUI : Nom : Avant / Après prélèvement

! Dengue, lepto, Copro/para, Palu..... Fiche de renseignements cliniques à remplir !

N'oubliez pas de marquer l'heure de prélèvement, et l'heure de recueil des urines si elle est différente.



TRANSMISSION DES RESULTATS

IDE : SMS IDE (PLAQ/INR)
Patient : Au labo Au Cab.IDE Internet Patient
A transmettre au médecin traitant : OUI / NON Nom du médecin traitant :
Le patient s'oppose à la transmission de ses résultats à l'équipe de soins ("je m'oppose" + signature) :

(Pour tout renseignement complémentaire, retrouvez-nous sur reunilab.re)

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE

Réception : Date/...../..... Heure : Par : (Id.Hexalis).....
Echantillons recus : B : ... J : ... V : ... M : ... G : ... Autre : ...
 Urines : Pot Bleu - Pot Jaune - T.Borate - T.Chimie - 24H - ADDIS
 Selles Ecouvillons : Autres :

POSITION DE L'ETIQUETTE, REMPLISSAGE DES TUBES CITRATE

Les tubes sont triés sur le Plateau Technique par un automate équipé d'une caméra – l'étiquette doit être correctement positionnée pour permettre cette lecture

En cas de **prélèvement à l'ailette**, ne pas oublier de purger avec un tube beige avant le tube bleu

Sur les tubes en général




- Respecter un espace entre le bouchon et l'étiquette
- Laisser une visibilité sur le niveau de remplissage
- Créer un léger décalage par rapport à l'étiquette du fabricant afin que la date de péremption du tube reste visible
- Ne pas dépasser sur la partie incurvée du tube

Sur le tube EDTA (mauve)



Tube Citrate (bleu)

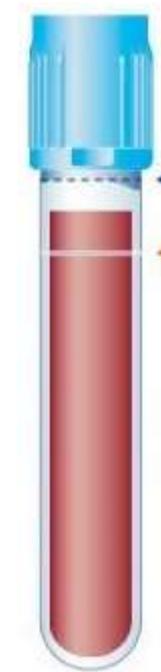

- Volume maximum (+10%)
- Indicateur de remplissage minimum

RETOUR DES RESULTATS

Les résultats peuvent être mis à disposition par différents moyens – **merci de nous indiquer sur la fiche de transmission !**

Au cabinet IDE	Au cabinet du Médecin	Au laboratoire	Sur Internet	Par lien SMS	Sur l'application INOVIE-Pad
					
<p>Les enveloppes contenant les résultats sont déposées par nos coursiers lors de leurs tournées.</p> <p>+ cocher sur la fiche de transmission « Au Cab.IDE »</p>	<p>Le laboratoire possède plusieurs moyens de rendus de résultats aux prescripteurs – compte-rendu papier, fax ou transmission informatique sécurisée.</p> <p>+ cocher sur la fiche de transmission « Au Cab.Dr »</p>	<p>Si le patient désire venir chercher ses résultats au laboratoire, une pièce d'identité ou une carte vitale pourra lui être réclamée afin d'assurer la confidentialité du rendu des résultats.</p>	<p>Site mesanalyses.fr Merci de renseigner le n° de portable du patient – dès que son compte-rendu est disponible, il va recevoir une alerte SMS avec le lien pour consulter son dossier</p> <p>+ cocher sur la fiche de transmission « Internet Patient »</p>	<p>Ce mode de diffusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> - est réservé aux résultats INR et PLAQUETTES - doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du laboratoire via un formulaire d'inscription. - Si vous êtes plusieurs collaborateurs au sein d'un même cabinet, l'identité du préleveur doit être précisée sur la fiche de transmission pour diffusion à la bonne personne + cocher « SMS IDE » 	<p>Ce mode de diffusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> - est accessible UNIQUEMENT sur l'application via des codes d'accès fournis par le laboratoire. - est réservé aux personnes ayant fait une demande préalable de formation à l'utilisation de l'application.

TRANSMISSION DES RESULTATS

IDE: SMS IDE (PLAQ/INR)

Patient: Au labo Au Cab. IDE A poster Internet Patient Au Cab. Dr Pas d'exemplaire

Le patient s'oppose à la transmission de ses résultats à l'équipe de soins («Je m'oppose» + signature) :

Avant le prélèvement



OBLIGATOIRE
Joindre la photocopie d'un document officiel d'identité avec photo (carte nationale d'identité, passeport...) à la fiche de transmission.
 Enfants : le livret de famille convient si la pièce d'identité n'est pas disponible



Le prélèvement



Faire décliner son identité au patient, vérifier la concordance avec l'ordonnance et la pièce d'identité
Remplir le tube au maximum IMPERATIVEMENT



Pour groupe sanguin en contexte transfusionnel avéré, grossesse, bilan préop., carte de groupe, prescription explicite = **2 déterminations= 2 boîtes = 2 tubes mauves EDTA.**
 Sinon 1 détermination = 1 tube mauve

Identification des tubes



Inscrire sur l'étiquette:

**LE NOM DE NAISSANCE
 TOUS LES PRENOMS
 LA DATE DE NAISSANCE**

C'est une exigence d'identitovigilance.

Conservation du matériel de prélèvement

Transport des échantillons après prélèvement

Température ambiante = Température inférieure à 25°C !

Respecter les **conditions de stockage du matériel** : les boîtes, tubes et autres matériels de prélèvement (tube borate urine, écouvillon bactério ...) doivent être conservés dans une salle où la température ne dépasse pas **25°C** (climatisée si nécessaire) et loin d'une exposition directe au soleil.

Transport dans des boites conformes à la **réglementation ADR** sur le transport par route des marchandises dangereuses, protégeant les échantillons des chocs, de la lumière et assurant le triple emballage.

Mise à disposition par notre laboratoire **de sacs isothermes** assurant une température de transport maîtrisée à condition d'utiliser les plaques réfrigérées fournies ; pendant 4h maximum.

