

Recueil d'urines sur poche pédiatrique Fiche de préconisation patient [KIT]

Le résultat de l'examen qui vous a été prescrit par votre médecin n'est interprétable que si le protocole est correctement suivi. Il est donc indispensable de bien lire ces informations et de respecter ces préconisations.

Intérêt du test : Cet examen consiste à rechercher **une infection urinaire**. La pose de la poche se fait de préférence au laboratoire par une personne habilitée. Les mains et muqueuses sont recouvertes de microbes invisibles alors que les urines sont stériles. Il ne faut donc **pas contaminer les urines**.



1. Bien se laver les mains au savon

2. Faire une toilette spécifique et soigneuse avec une compresse stérile imbibée de **Dakin** :

- d'avant en arrière chez la fille
- bien nettoyer le gland chez le garçon


3. Préparer le collecteur :

- après avoir vérifié l'intégrité de l'emballage
- ouvrir le sachet et le sortir
- enlever le papier de protection



4. Pour les filles, bien placer la partie arrière du collecteur sur la fourchette vulvaire puis appliquer l'avant, pour éviter les fuites d'urine. **Pour les garçons**, le pénis doit être glissé dans le collecteur.

Mettre une **couche propre** de préférence. Si l'enfant fait des **selles** le prélèvement est jeté car contaminé.

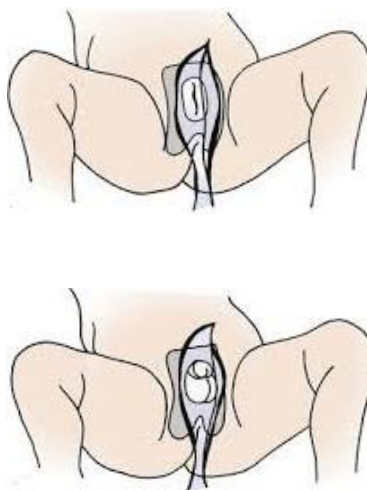

5. Laisser le collecteur en place maximum 30 minutes, en faisant boire si possible. Au-delà, si pas d'urines, il faut l'enlever et en replacer un autre. Dès que l'enfant a uriné, enlever le collecteur, le refermer et le placer ouverture vers le haut dans le flacon stérile fourni, de façon à ce qu'il ne se renverse pas. Amener le flacon dans les **2 heures** au

